

PRESSY7[®]

Quality
Pharmacy
Products

*Miglioratevi. Rilassatevi.
Qualificatevi.*





LA TECNOMEDICA[®]
La misura
della professionalità

PRESSY7

Innovazione tecnologica

Una postazione comoda, indipendente e ideale per la misurazione automatica della pressione arteriosa. Pressy 7, in poco spazio un grande aumento di credibilità e affidabilità.

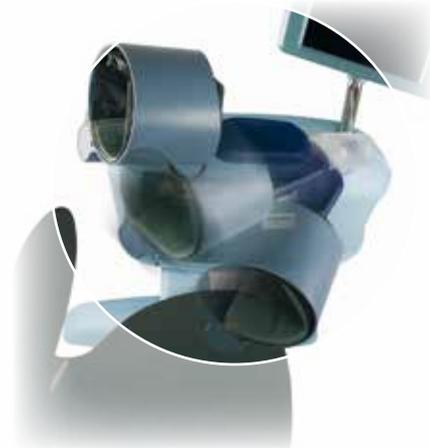


Bracciale mobile omnidirezionale

Il bracciale automatico si può muovere in tutte le direzioni. In tal modo si adatta perfettamente all'altezza ed alla postura del soggetto, consentendogli una posizione naturale e rilassata.

Carrello scorrevole per facilitare l'inserimento del braccio

Grazie alla caratteristica esclusiva di PRESSY 7, per cui il bracciale è montato su di un carrello scorrevole, anche le persone con limitata possibilità di movimento possono infilare facilmente il braccio nel bracciale senza dover compiere alcuna rotazione del busto.

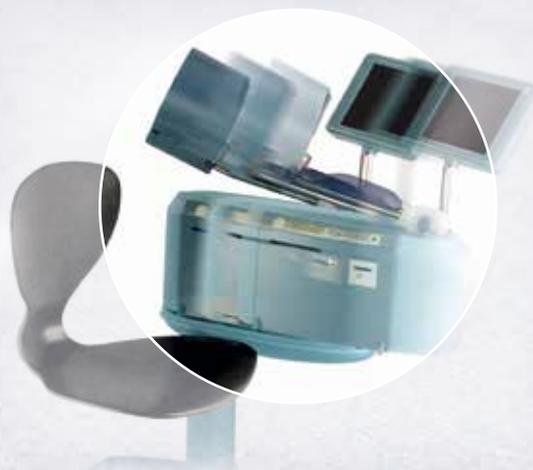

CE 0051*

* L'IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità) è l'Ente Notificato dal Ministero della Salute che ha certificato la qualità delle prestazioni e della sicurezza di questo dispositivo medico in conformità a quanto previsto dalla direttiva 93/42 CEE e successive modifiche ed integrazioni. L'IMQ ha inoltre il compito di effettuare le verifiche ispettive annuali al fine di mantenere sotto controllo gli elementi di rispondenza ai requisiti di qualità e sicurezza.

al servizio della Farmacia per la soddis

Rilevazione delle aritmie

PRESSY 7 riporta sullo scontrino la rappresentazione analogica degli impulsi, grazie alla quale è possibile rilevare eventuali aritmie.




GEORGE STUART PHARMACY
123 Paris Av. - BERLIN-06 45 67 89

Date 13-09-06 Time 15.16

SYS	DIA	PULSE
124	62	74
mmHg	mmHg	/min

PULSE INTENSITY DIAGRAM

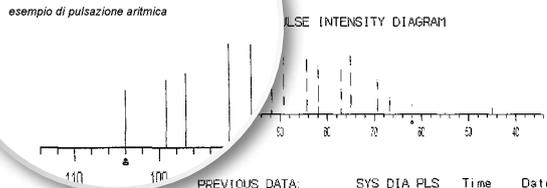

PREVIOUS DATA:	SYS	DIA	PLS	Time	Date
-----	124	80	68	13.47	17-09-06
-----	130	78	76	08.25	05-09-06
-----	127	84	75	17.47	27-08-06
-----	130	82	77	13.47	05-08-06
-----	135	85	79	10.17	21-07-06
-----	136	84	75	13.20	15-07-06
-----	143	91	79	12.37	27-06-06
-----	132	83	76	13.47	17-06-06
-----	145	88	77	13.47	19-05-06
-----	152	90	78	13.47	10-05-06
-----	152	87	78	13.47	17-04-06
-----	158	94	82	13.47	07-04-06


Warning: the data have only an indicative value.
For diagnostic interpretations turn to your doctor.

GEORGE STUART PHARMACY
123 Paris Av. - BERLIN-06 45 67 89

Date 13-09-06 Time 15.16

SYS	DIA	PULSE
124	62	74
mmHg	mmHg	/min

PULSE INTENSITY DIAGRAM

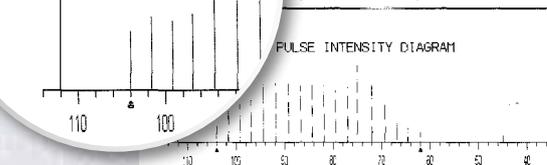

Conformità alle norme CEI senza modifiche all'impianto elettrico della farmacia.

Grazie ad uno specifico dispositivo d'isolamento dall'impianto elettrico della farmacia, Pressy 7 non richiede né l'applicazione del nodo equipotenziale né i controlli biennali dell'impianto. Quando viene usato, Pressy 7 si disgiunge totalmente dall'impianto del locale, utilizzando la sua fonte di alimentazione interna.

Rilevazione dei disturbi

Tramite l'indicazione di tutti gli impulsi rilevati, anche quelli che il software ha scartato, come, per esempio, i movimenti della persona, il medico curante sarà in grado di valutare l'affidabilità dei risultati analizzando la correttezza della misurazione.

fazione dei vostri clienti.

Quality
Pharmacy
Products

Display 10" multifunzioni personalizzabile

Una bella presenza a colori. Le istruzioni di funzionamento vengono trasmesse, in multilingue, tramite videoanimazioni. Nella situazione di non utilizzo il display si trasforma in una videovetrina per filmati personalizzati o messaggi promozionali, che voi stessi potrete comporre utilizzando il vostro PC. Sempre in modo autonomo potrete gestire le pagine stabilendone la durata e la successione.



Poltroncina ergonomica

Rivestita in pelle e dotata di un ampio schienale a comportamento dinamico, la seduta risulta rilassante e, al tempo stesso, ottimale per una corretta misurazione.



Funzionamento a monete

La gettoniera elettronica è installata sul fronte della macchina e accetta tutti i tagli di monete da 0,10 a 1,00 euro. È pratica da utilizzare, e comoda da svuotare.



Memory card multifunzione

La memory card, grazie al microchip incorporato, può essere utilizzata come una carta ricaricabile: ad ogni utilizzo viene detratto dalla macchina l'importo dovuto. Ad esaurimento del credito si può ricaricare dell'importo desiderato.



Gestione autonoma della tariffa

La tariffa può essere facilmente programmata e variata in qualsiasi momento senza richiedere alcun intervento tecnico.

Connessione

USB



Connessione USB

La possibilità di connessione USB permette al farmacista di interagire con la macchina, inserendo file jpg, in modo semplice e veloce.



LA TECNOMEDICA
La misura
della professionalità

e design all'avanguardia.

Quality
Pharmacy
Products

Caratteristiche

Vantaggi

MISURAZIONE DELLA PRESSIONE E DELLA FREQUENZA DEL POLSO

La misurazione della pressione sistolica (massima) e diastolica (minima) da **280 a 40 mm/Hg** con risoluzione di **1,5 mm/Hg** e la misurazione della frequenza del polso da **0 a 250 puls/min** con risoluzione di **1 puls/min**.

L'utilizzo dei metodi **Riva-Rocci-Korotkoff** e **Oscillometrico**, le tecniche più utilizzate per misurare la pressione, garantiscono **precisione e affidabilità**, secondo i parametri richiesti dai più importanti organismi internazionali.

MEMORIZZAZIONE E VISUALIZZAZIONE DATI

I dati vengono stampati su una scheda che riporta, oltre **l'intestazione della Farmacia**, i risultati della misurazione e quelli storici, anche il grafico di tutte le pulsazioni, evidenziando le eventuali aritmie.

È possibile inserire nello scontrino **diciture personalizzate della Farmacia**. La larghezza di ben **112 mm**, facilita la lettura del grafico e del tracciato. La sostituzione dei rotoli di carta termica è estremamente semplice.

BRACCIALE AUTOMATICO COMPLETAMENTE MOBILE

Adatto a braccia con circonferenza da **21 a 35 cm**.

Il bracciale è completamente mobile in tutte le direzioni, assicurando alla persona una postura naturale e comoda.

COMPRESSIONE PERSONALIZZATA E DECOMPRESSIONE STABILIZZATA DEL BRACCIALE

La compressione è relativizzata al livello pressorio individuale, mentre la decompressione è stabilizzata elettronicamente.

Si evita un'eccessiva compressione del braccio, mentre la velocità di decompressione è mantenuta costantemente tra 2 e 3 mm/Hg al secondo, indipendentemente dalla dimensione del braccio.

MEMORY CARD

Memory card personale. Consente di archiviare in **memoria fino a 120 misurazioni**.

Riporta l'intestazione della Farmacia e contiene i dati personali del cliente. Costituisce un formidabile strumento di fidelizzazione!

FUNZIONAMENTO A MONETA O CARD SOTTO IL CONTROLLO AUTONOMO DEL FARMACISTA

La **gettoniera elettronica** è in grado di accettare monete da **0,10 - 0,20 - 0,50 - 1,00 euro**. Il pagamento può essere effettuato anche scalando l'importo dal credito inserito nella memory card.

La memory card può essere ricaricata in qualsiasi momento e contiene anche i dati relativi alle misurazioni della pressione eseguiti con i nostri apparecchi. La tariffa e le successive variazioni possono essere effettuate autonomamente dalla Farmacia, senza intervento tecnico.

ALIMENTAZIONE

PRESSY 7 funziona in bassa tensione (24V DC). Oltre a ciò, è dotato di un circuito con batterie ricaricabili che forniscono l'alimentazione durante il ciclo della misurazione. In tal modo l'apparecchio viene ad essere galvanicamente separato ed indipendente dall'impianto elettrico della Farmacia.

Grazie a questa caratteristica non si rende necessario alcun adeguamento dell'impianto elettrico della Farmacia qualunque esso sia.

DISPLAY 10,2" A COLORI

Tutte le informazioni e i dati vengono riportati su un monitor 10,2" a colori.

Display LCD retroilluminato.

COLLEGAMENTI ESTERNI

Interfaccia **USB**.

Consente di **collegarsi al computer della macchina da un pc esterno**.

POLTRONCINA ERGONOMICA

Con **appoggia schiena flessibile**.

I clienti siedono più comodamente e possono meglio rilassarsi per una misurazione più precisa.

ALTRI DATI TECNICI

Peso: 37 kg · **Dimensioni cm:** Pedana 70x60 · **Altezza** 100 · **Proiezione a terra** 74x68-88 (100x88 compreso display)
Temperature di funzionamento da 10° a 40° C · **Temperatura di immagazzinamento** da 0° a 60° C
Umidità max: 85% RH · **Alimentazione esterna:** 100÷240V / 50-60Hz.

LA TECNOMEDICA

Un'azienda italiana presente in farmacia da oltre 50 anni, specializzata nell'ideazione e nella produzione di misuratori di pressione e di bilance pesapersone. Strumenti di precisione multifunzionali, innovativi, precisi, qualificanti e fidelizzanti, che associano ricerca elettronica ad affidabilità automatica.



*Concessionario di zona.
Vendita e assistenza tecnica.*



LA TECNOMEDICA S.r.l.
27058 Voghera (PV) Italy • Via Arcalini, 16
T. +39 0383 365512 • F. +39 0383 365484
vendite@latecnomedica.it • www.latecnomedica.it